


HASZNÁLATI UTASÍTÁS HYPERION SMART LASER 880

1. Termékfelépítés

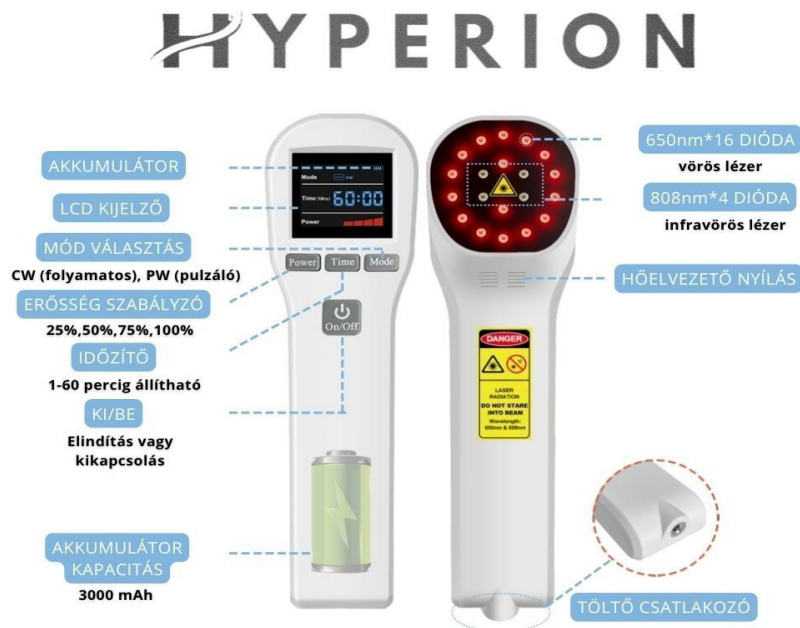

1. Bekapcsolás (ON/OFF gomb): Nyomja meg az ON/OFF gombot hosszan a készülék ki- és bekapcsolásához. Ha megjelent a képernyő nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a kezelés elkezdéséhez.
2. Üzem mód kiválasztása (Power gomb): Nyomja meg a Power gombot a kívánt energia szint beállításához. Az energia szintjei: 25%, 50%, 75%, 100% (növekvő teljesítmény).
3. Időzítő beállítása (Time gomb): Nyomja meg a Time gombot a kívánt kezelési idő beállításához. Az időzítés 1-től 60 percig állítható, 1 perces lépésenként. Az alapértelmezett idő 20 perc. A kezelés során a visszaszámlálás folyamatosan csökken, amíg el nem éri a 0-t, ekkor a készülék automatikusan kikapcsol.
4. Töltés Amikor az akkumulátor töltése alacsony, a kijelző figyelmeztetést adhat (pl. villogó ikon). Töltés közben az ikon jelzi, hogy az eszköz töltődik. Teljes feltöltés esetén az akkumulátor ikonja teljesen megtelik.

2. Alkalmazási területek:

Mozgásszervi problémák

- Ízületi fájdalmak (pl. térd, váll, csukló)
- Krónikus gyulladások (arthritisz, reuma)
- Izomfeszültség, izomhúzódás

Bőr- és sebkezelés

- Felületi sebek, hegek, vadhús
- Pikkelysömör, barna folt
- Ekcéma, akné, bőrgyulladások

Fogászat és fülproblémák

- Ínygyulladás, afták
- Fülzúgás, gyulladásos fülpanaszok

Állatgyógyászat

- Ízületi gondok, műtét utáni regeneráció

Kozmetika

- Bőrifiataltítás, gyulladáscsökkentés, regenerálás

Keringési problémák

- Vérnyomáscsökkentés támogatása
- Helyi vérkeringés javítása
- Visszér

Sebészeti probléma

- Sérv

PW mód (pulzáló üzemmód) – általános, legtöbb kezeléshez

Ajánlott: friss, hosszabb ideje fennálló ízületi fájdalmak, gyulladás esetén, akut fájdalomnál

Pl.: térdízületi gyulladás, régi hegek, letapadt kötőszövetek, sportsérülés utáni érzékeny izom



CW mód (folyamatos üzemmód) – neuroterápiában, idegi eredetű fájdalmaknál

Ajánlott: idegi érintettség, zsibbadás, neuropátiás fájdalom esetén

Pl.: isiász (ülőideg fájdalom), kéz- vagy lábzsibbadás, idegbeicipődés

3. Utasítások

Szorítsa az eszközt közvetlenül a bőrre, úgy kezelje magát vele! Ne ruhán keresztül, mert az tompítja a fényt. A lézertény kb. 8 cm mélyen hatol be a szövetekbe. A kezelési pont a vörös fénnel fedett terület. A 4 db 808 nm hullámhosszon sugárzó led az emberi szem számára nem látható fényt bocsájt ki, ne ijedjen meg, ha úgy látja, hogy azok nem világítanak. Azt javasoljuk, hogy vállaljon egy 3 hetes kezelési tervet (a táblázat alapján) és fontos, hogy ehhez tartsa magát! Ha azonnal látja az eredményeket, nagyszerű, folytassa. Ha azonban nem érzi pár nap alatt a javulást, tudjon róla, hogy ez is normális. Amennyiben magas vérnyomását kezelné mellkas, nyak, hasi terület világítása ajánlott, mivel közelebb vannak a szívhez, nagyobb artériákhoz vagy idegi központokhoz.

Tünet / Kezelési terület	Napi ismétlés / Kezelési idő	Üzemmód	Teljesítmény
Nyaki és deréktáji fájdalom	2x / 15–20 perc	PW	100%
Felső/középső hátfájás	2x / 15–20 perc	PW	100%
Csukló- és térdfájás	2x / 15–20 perc	PW	100%
Sarkantyú (sarokfájás)	2x / 10–15 perc	PW	100%
Teniszkönyök	2x / 10–15 perc	PW	100%
Sebgöygyülés / égés	1-2x / 10–15 perc	PW	100%
Íngyulladás	2x / 15 perc	PW	100%
Ízületi gyulladás / tendinitis	2x / 15 perc	PW	100%
Gyulladáscsökkentés általában	2x / 15 perc	PW	100%
Izomfájás / myofasciális szindróma	2x / 15–20 perc	PW	100%
Plantaris fasciitis (talpi bõnye gyulladás)	2x / 15–20 perc	PW	100%
Akne / bőrgyulladás	1-2x / 15–20 perc	PW	100%
Idegregeneráció	2x / 15 perc	CW	100%
Alagút szindróma	2x / 15 perc	CW	100%
Hegyek kezelése	1-2x / 15-20 perc	PW	100%
Fogfájás	1-2x / 10-15 perc	PW	100%
Fülzúgás	1-2x / 20 perc	PW	100%
Arcüreggyulladás	1-2x / 10-15 perc	PW	100%
Visszér/Fekélyes láb	2x / 20 perc	PW	100%
Nehéz láb érzés	2x / 20 perc	PW	100%
Porckopás (arthrosis)	2x / 20 perc	PW	100%
Vérnyomás kezelés	2x / 10-15 perc	PW	100%

4. Termékleírás

Készülék mérete: 21.5 x 6 x 5 cm

Nettó tömeg: 0.25 kg

Anyag: ABS műanyag

Lézer típusa: GaAIAs lézer

Hullámhossz: 650:808 nm lézertény

Akkumulátor kapacitás: 3000 mAh

Maximális kimeneti teljesítmény: 880 mW

Behatolás: 8 cm mélyen az emberi testbe

Garancia: 3 év

5. Csomag tartalma

- Hyperion Smart Laser 880 készülék
- USB Adapter fej 220V
- Jack (3,5mm) tápkábel
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Fényvédő szemüveg

6. Ellenjavallatok és Figyelmeztetések

Nem használható a készülék:

- Ne használj, ha rákos megbetegedés van vagy gyanított daganat.
- Ne használj, ha epilepsziás rohamra hajlamos vagy.
- Ne használj, ha pajzsmirigy betegséged van.
- Ne használj, ha vérzékenységed van vagy véralvadástlót szedsz.
- Ne használj pacemaker, vagy egyéb elektronikus implantátum közelében.
- Ne használj, ha immunrendszered stimulálása kockázatos (pl. autoimmun betegségek esetén).
- Ne használj közvetlenül fertőzött, nyílt sebre. Konzultálj orvossal, ha:
- Sztteroidot, antibiotikumot vagy kemoterápiás szert szedsz.
- Fényérzékenyítő gyógyszert vagy krémet használj.

*Ne használja a lézerkészüléket víz körül.

*Ne nézzen közvetlenül a fénybe, használjon védőszemüveget a készülék használata közben.

*Ne kezelje magát a szeme közelében.

*Ne használja gyúlékony gázok vagy anyagok közelében.